

Болезни органов дыхания**Пневмония вирусная.****Пневмония бактериальная.****Хронический бронхит вне стадии обострения.**


На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на проекции корня легких.

- **Программа №20;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее справа - налево;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

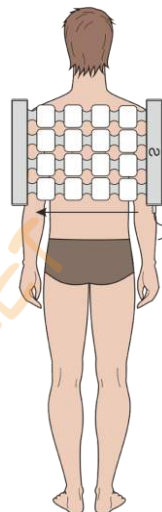**Бронхиальная астма и ХОБЛ.**


На курс 15 сеансов. Следующий курс через 2- 3 месяца

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИГ

Излучатели размещают: ОИ на проекции корня легких, ЛИГ на проекции надпочечников.

- **Программа №21;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее справа - налево;
ЛИГ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 20 мТл, ЛИГ – 6 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИГ -16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

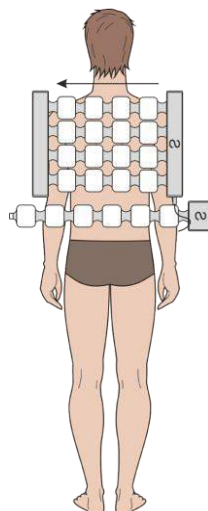

Экссудативный плеврит (после удаления жидкости из плевральной полости, через трое суток после торакоцентеза)

На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Первые 3 сеанса


Излучатели размещают: больной лежит на здоровом боку, ОИ со спины на грудь на область поражения.

- **Программа №22;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 3 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

С 4-го сеанса до конца курса

Излучатели размещают: пациент лежит на здоровом боку, ОИ со спины на грудь на область поражения.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

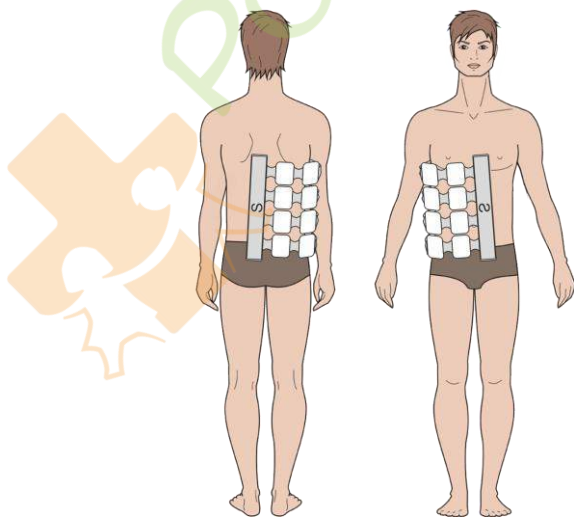

Пример размещения
излучателя

Болезни органов пищеварения

Рефлюкс-эзофагит (гастроэзофагальная рефлюксная болезнь легкой и средней тяжести).

На курс 15 сеансов. Следующий курс через 2 – 3 месяца.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: Высоко на область эпигастрия с захватом нижней трети грудины.

- **Программа №56;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 30 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.



Язвенная болезнь желудка и 12^{-ти} перстной кишки


На курс 10- 12 сеансов. Следующий курс через 2 – 3 месяца.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на грудной и поясничный отдел позвоночника, ЛИ на область эпигастрия.

- **Программа №57;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 20 мТл, ЛИ – 30 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИ - 16 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

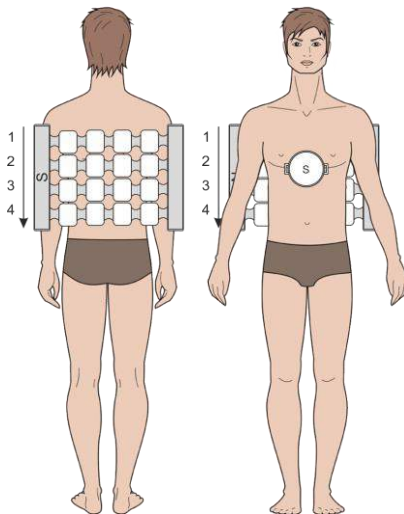

Гастрит и дуоденит


На курс 15- 20 сеансов. Следующий курс через 2 – 3 месяца.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на грудной и поясничный отдел позвоночника, ЛИ на область эпигастрия.

- **Программа №58;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 20 мТл, ЛИ – 30 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИ - 16 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

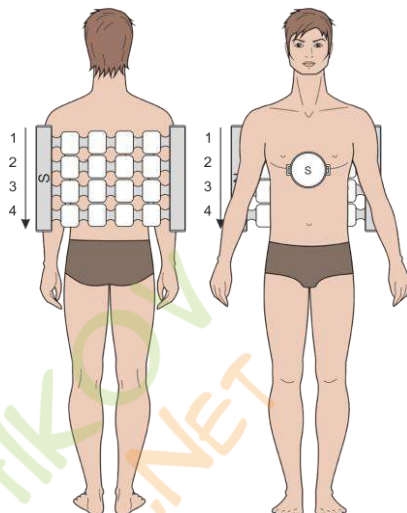

Синдром раздражённого толстого кишечника без диареи


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на живот.

- **Программа №24;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

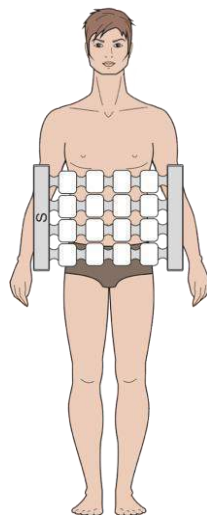

Алкогольная болезнь печени

На фоне продолжающегося приема алкоголя лечение противопоказано!


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ со стороны спины на область проекции печени.

- **Программа №25;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
- Индукция: 25 мТл;
- Частота: 75 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

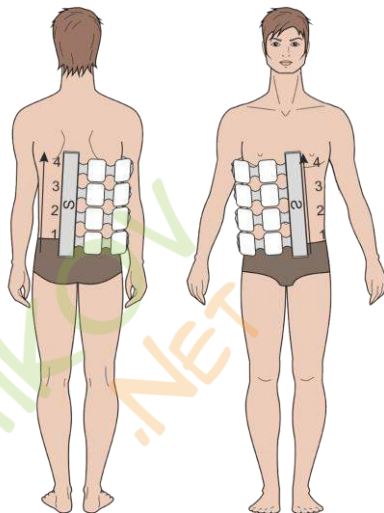

Пример размещения излучателя

Хронический гепатит.

Токсическое поражение печени неуточнённое.


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на спине (рабочая область излучателя на области проекции печени), ЛИ на область желчного пузыря.

- **Программа №59;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева – направо;
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ-20 мТл, ЛИ-35 мТл;
- Частота: ОИ-100 Гц, ЛИ – 50 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

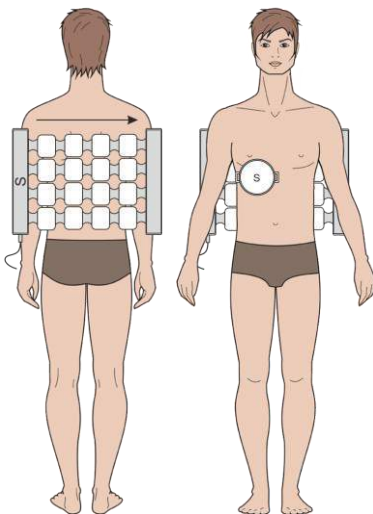

Холецистит

Лечение аппаратом начинается в период стихания обострения или во внеприступный период с целью профилактики.

На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Первые 3 сеанса

Излучатели размещают: ОИ на области грудного и поясничного отделов позвоночника, ЛИ на область желчного пузыря.

– **Программа №60;**

– Тип магнитного поля:

ОИ – бегущее слева – направо;

ЛИ – неподвижное;

– Индукция: 10 мТл;

– Частота: 100 Гц;

– Время воздействия: 15 мин.

С 4-го сеанса и до конца курса

Излучатели размещают: ОИ на области грудного и поясничного отделов позвоночника, ЛИ на область желчного пузыря.

– **Программа №61;**

– Тип магнитного поля:


ОИ – бегущее слева – направо,

ЛИ – неподвижное;

– Индукция: 10 мТл;

– Частота: 10 Гц;

– Время воздействия: 15 мин.

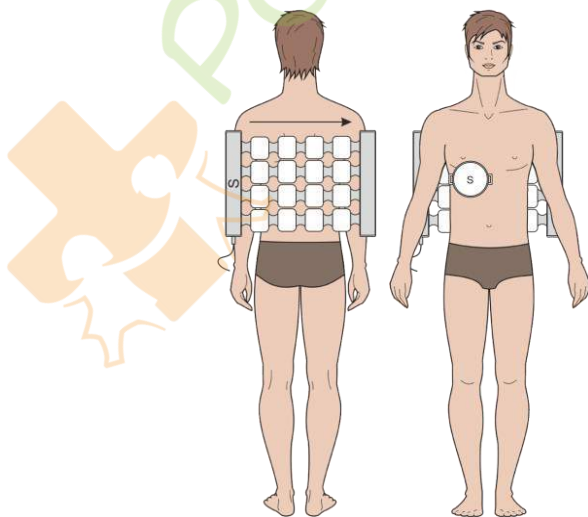

Дискинезия желчевыводящих путей

Лечение аппаратом начинается в период стихания обострения или во внеприступный период с целью профилактики.


На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на области грудного и поясничного отделов позвоночника, ЛИ на область желчного пузыря.

- **Программа №61;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева – направо,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

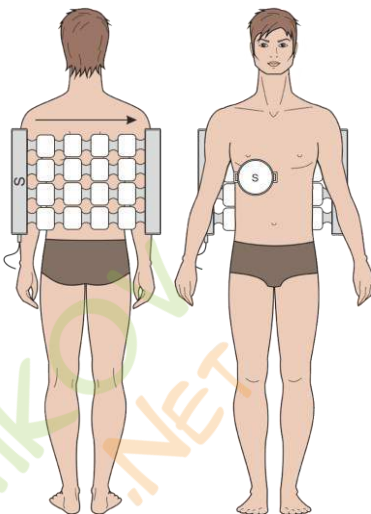

Гипомоторная дискинезия желчного пузыря (холецистопатия без наличия желчных камней!)


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на область проекции желчного пузыря.

- **Программа №62;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 45 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

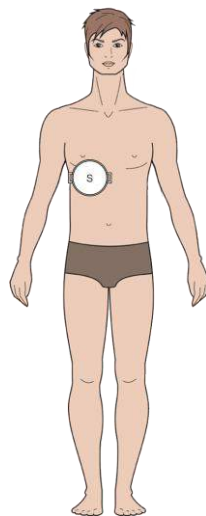


Хронический панкреатит

На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИГ

Излучатели размещают: ОИ на области грудного и поясничного отделов позвоночника, ЛИГ - на область проекции поджелудочной железы, на брюшную стенку.

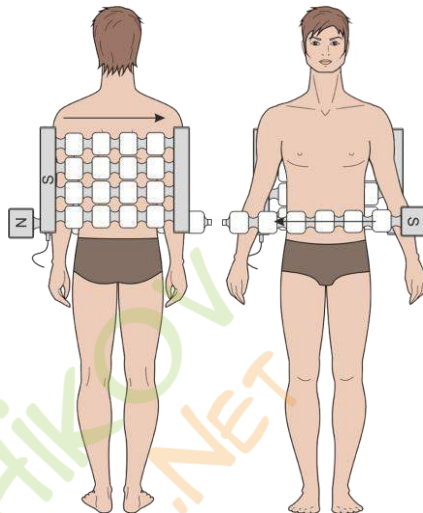

- **Программа №26;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева - направо,
ЛИГ – бегущее слева - направо;
- Индукция: 2 мТл;
- Частота: 5 Гц;
- Время воздействия: 8 мин.


Синдром оперированного желудка

На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ - на область проекции эпигастрия и послеоперационный рубец.

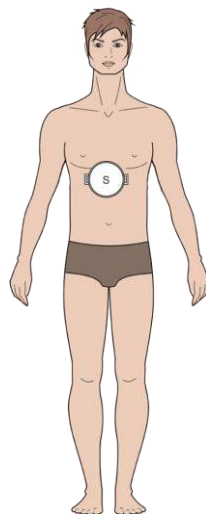

- **Программа №63;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 30 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

Постхолецистэктомический синдром


На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: 2 ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ – на область проекции печени и сегментарно сзади.

- **Программа №64;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 35 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 12 мин.

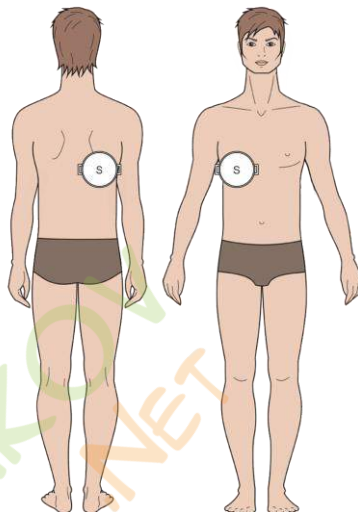

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Келоидные рубцы

Внимание! С целью профилактики образования келоидного рубца эту же методику применяют для лечения послеоперационных и посттравматических ран.


На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ - на область рубца.

- **Программа №65;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 35 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

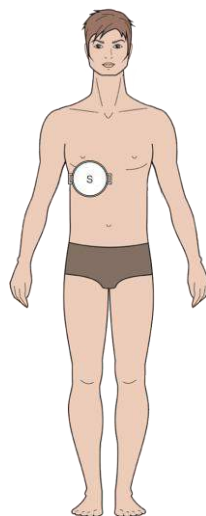

Пример размещения
излучателя

Красный плоский лишай


На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на отдел позвоночника, соответствующий области высыпания, ЛИ – на область высыпаний.

- **Программа №66;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ- 10 мТл, ЛИ - 20 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

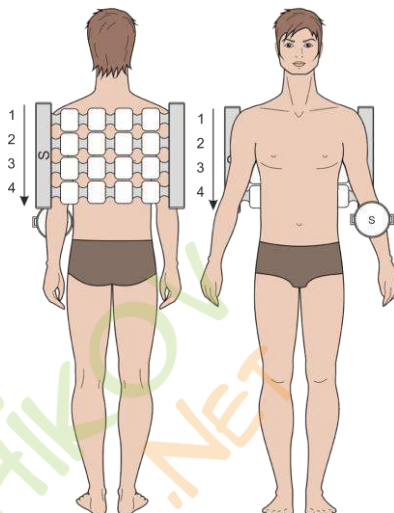

Пример размещения излучателей

Ограниченный нейродермит, кожный зуд, крапивница, экзема, нейродермит, почесуха, атопический дерматит


На курс 10 – 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на отдел позвоночника, соответствующий области высыпания, ЛИ – на область высыпаний.

- **Программа №67;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз;
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

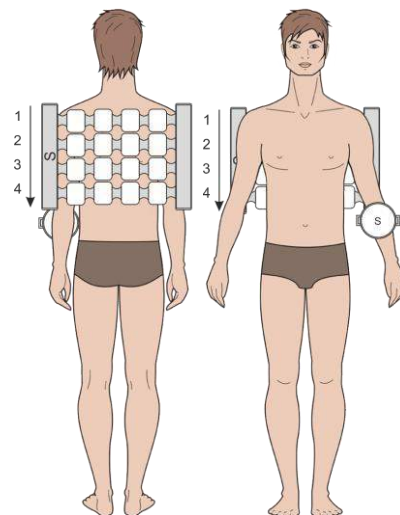

Пример размещения излучателей

Псориаз


На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на отдел позвоночника, соответствующий области очагового поражения, ЛИ – на область очагового поражения.

- **Программа №66;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ- 10 мТл, ЛИ - 20 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

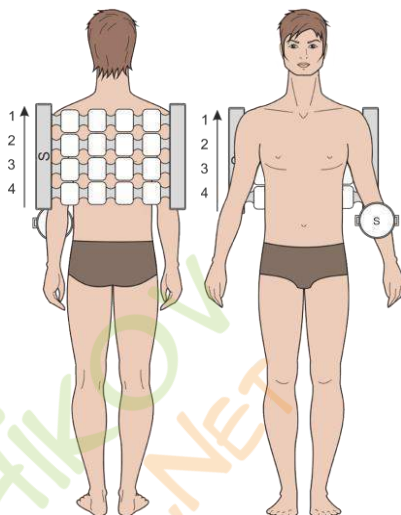

Пример размещения излучателей

Случай псориатической артропатии


На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: между 2-мя ЛИ помещают пораженный сустав.

- **Программа №52;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 20 мТл;
- Частота: ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

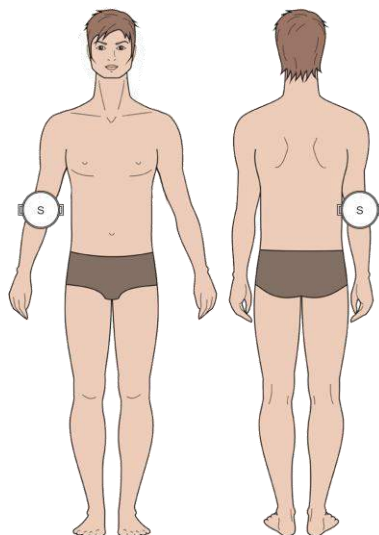

Пример размещения излучателя

Гидраденит.

На курс 15 – 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

первые 3 сеанса



Излучатели размещают: ЛИ на область вскрытия полярностью «S» к телу.

- **Программа №68;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 20 мТл;
- Частота: ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

С 4-го сеанса до конца курса

Излучатели размещают: ЛИ на область вскрытия полярностью «N» к телу.

- **Программа №68;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 20 мТл,
- Частота: ЛИ -50 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

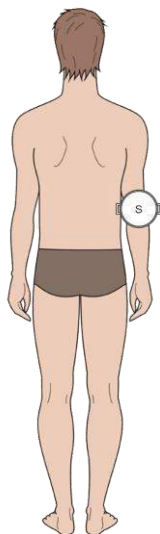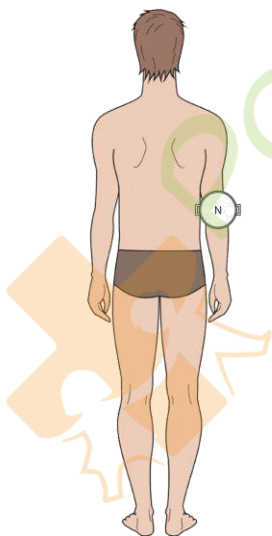

Пример размещения
излучателя

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани**Подагрический артрит.**

На курс 15 сеансов.

В связи с тем, что заболевания носят хронический характер, с целью метафилактики необходимо проводить повторные курсы импульсной магнитной терапии 2-3 раза в год

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Первые 3 сеанса



Излучатели размещают: ЛИ на пораженный сустав полярностью «S» к телу.

- **Программа №69;**
- Тип магнитного поля: ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 10 мТл;
- Частота: ЛИ -100 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

С 4-го сеанса до конца курса

Излучатели размещают: ЛИ на пораженный сустав полярностью «N» к телу.

- **Программа №70;**
- Тип магнитного поля: ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 15 мТл;
- Частота: ЛИ -10 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

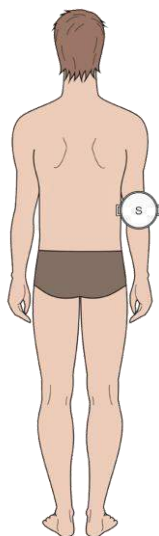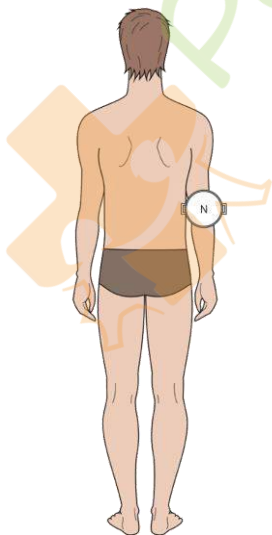

Пример размещения
излучателя

Коксартроз

На курс 15 сеансов.

В связи с тем, что заболевания носят хронический характер, с целью метафилактики необходимо проводить повторные курсы импульсной магнитной терапии 2-3 раза в год.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Первые 5 сеансов


Излучатели размещают: ОИ
оборачивают пораженный сустав.

- **Программа №27;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева -
направо;
- Индукция: 15 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

С 6 сеанса и до конца курса

Излучатели размещают: ОИ
оборачивают пораженный сустав.

- **Программа №28;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева -
направо;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 25 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

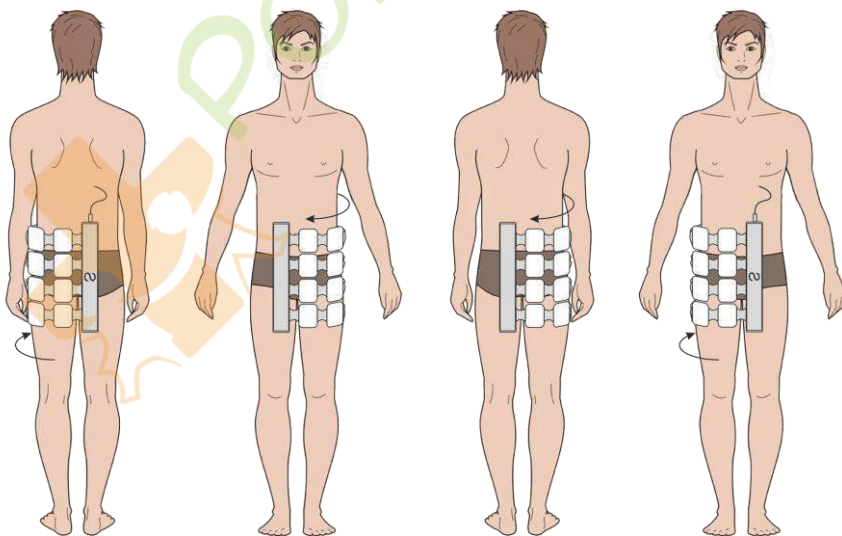

Левая сторона

Правая сторона

Гонартроз

На курс 15 сеансов.

В связи с тем, что заболевания носят хронический характер, с целью метафилактики необходимо проводить повторные курсы импульсной магнитной терапии 2-3 раза в год

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Первые 5 сеансов


Излучатели размещают: ОИ
оборачивают пораженный сустав.

- **Программа №29;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее слева - направо;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.


С 6 сеанса и до конца курса

Излучатели размещают: ОИ
оборачивают пораженный сустав.

- **Программа №30;**
- Тип магнитного поля
ОИ – бегущее слева - направо;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

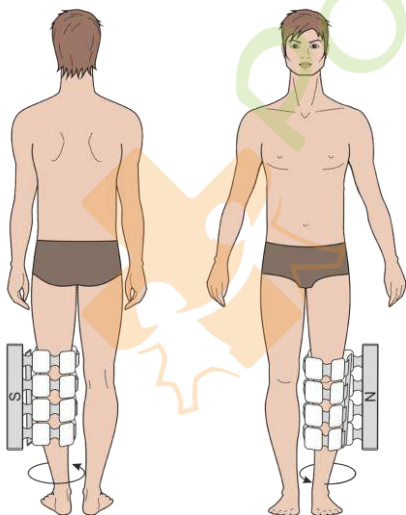

Левая сторона

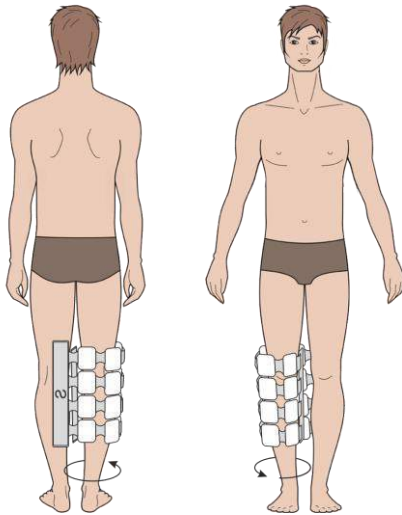

Правая сторона

Артроз первого пястно-запястного сустава

На курс 15 сеансов.

В связи с тем, что заболевания носят хронический характер, с целью метафилактики необходимо проводить повторные курсы импульсной магнитной терапии 2-3 раза в год

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Первые 3 сеанса


Излучатели размещают: ЛИ на пораженный сустав полярностью «N» к телу.

- **Программа №71;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 8 мТл;
- Частота: ЛИ -100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

С 4-го сеанса до конца курса

Излучатели размещают: ЛИ на пораженный сустав полярностью «N» к телу.

- **Программа №72;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ЛИ - 15 мТл;
- Частота: ЛИ -10 Гц,;
- Время воздействия: 20 мин.

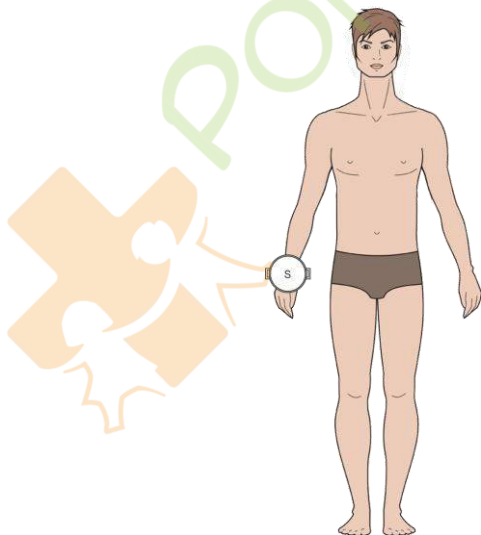

Пример размещения
излучателя

Наружный («локоть теннисиста») и внутренний («локоть игрока в гольф») эпикондилит плеча.


На курс 15 – 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИГ

Излучатели размещают: ЛИГ-ом
оборачивают пораженный локоть.

- **Программа №31;**
- Тип магнитного поля:
ЛИГ – бегущее в право-вращении;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

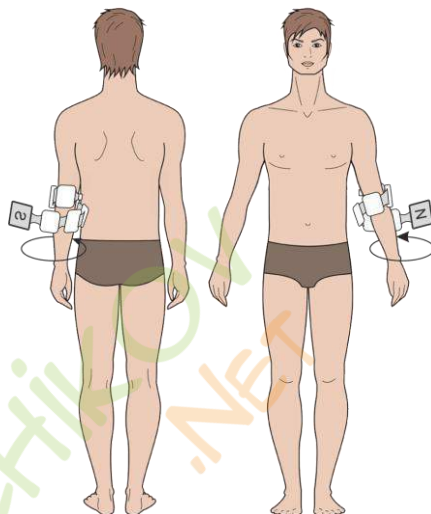

Плечелопаточный периартроз


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на шейно-грудной отдел позвоночника со смещением в сторону пораженного сустава, ЛИ на пораженный сустав.

- **Программа №73;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 20 мТл, ЛИ – 30 мТл;
- Частота: ОИ - 100 Гц, ЛИ – 10 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

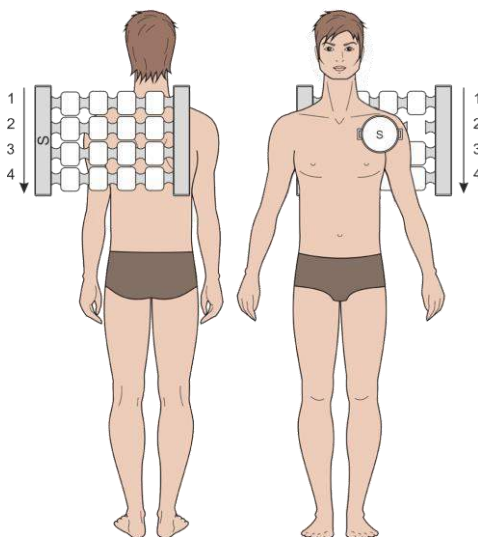

Пример размещения
излучателя

Острая трофоневротическая костная атрофия (синдром Зудека).

На курс 10 сеансов.

В сеансе 3 процедуры.

Излучатели: ОИ

1-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ на шейно-воротниковую область.


- **Программа №32;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 7 мин.



2-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ оборачивают плечо.


- **Программа №32;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу – вверх;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 7 мин.

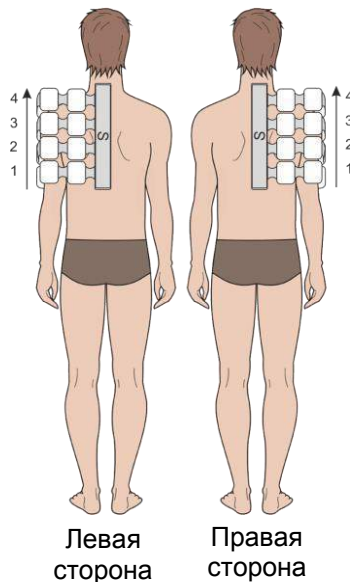

3-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ оборачивают предплечье и кисть.

- **Программа №32;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 7 мин.

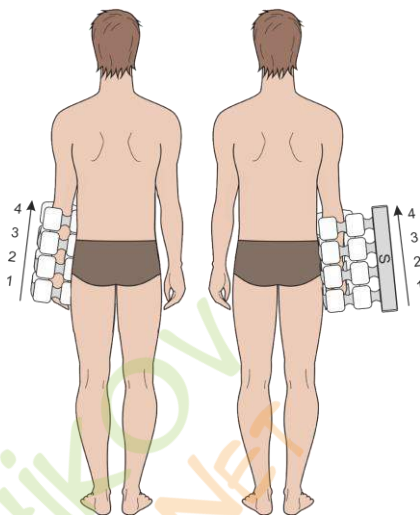

Примечание: Это тяжелое осложнение перелома лучевой кости в типичном месте (нижняя треть предплечья). У больного даже при своевременной и правильно наложенной иммобилизации после ее снятия долго остаются боль в руке, не исчезающий отек пальцев, кисти и нижней трети предплечья, пальцы «стеклянные», холодные на ощупь, развивается контрактура в лучезапястном, пястно-фаланговых и межфаланговых суставах, на рентгенограммах – пятнистый остеопороз костей кисти. В основе патологии, которая без лечения неизбежно приведет к инвалидизации больного, лежит грубое нарушение микроциркуляции в пораженной руке, с полным прекращением кровотока в части капилляров и их пассивным расширением, изменением кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза, что приводит к активной пролиферации фибробластов и синтезу тропоколлагена. Исход процесса – быстрое рубцовое перерождение высокодифференцированной ткани скользящего аппарата кисти и ее обездвиженность. Особенностью лечения патологии является то, что **категорически исключается применение тепла во всех видах (совет «парить руку» - непростительная ошибка в подобных случаях!)** Нельзя даже принудительно здоровой рукой двигать пораженные пальцы. Магнитное поле как лечебный фактор в этих случаях влияет на реологические свойства крови, обладает обезболивающим, противовоспалительным, трофостимулирующим, противоотечным эффектами, нормализует микроциркуляцию и венозный кровоток. В отличие от электромагнитных воздействий другого характера (СМВ, ДМВ, УВЧ, индуктотермия) МП не обладает тепловым эффектом, что в данном случае принципиально важно. Более того, его применение возможно начать очень рано, сразу после «затвердевания гипса». Показано, что в подобных случаях после применения МП у подобных больных на 2-3 недели раньше исчезал отек и восстанавливалась функция кисти.

Паратенонит (крепитирующий тендовагинит предплечья)


На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ
оборачивают пораженную конечность.

- **Программа №33;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
- Индукция: 25 мТл;
- Частота: 75 Гц;
- Время воздействия:
20 мин.

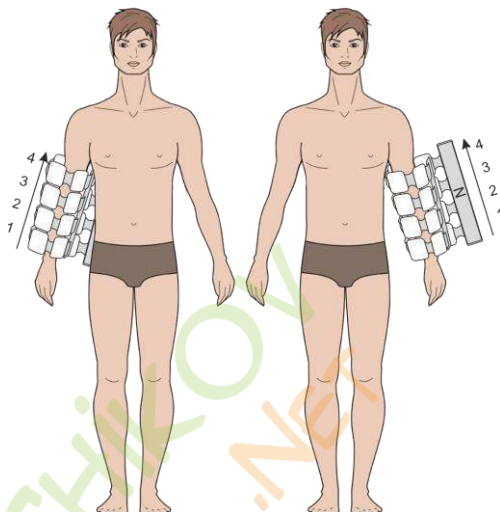

Синдром Титце (асептическое воспаление реберных хрящей в области прикрепления ребре к груди, чаще II-IV ребер с болезненным утолщением)


На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на пораженную область.

- **Программа №74;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 35 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 15мин.

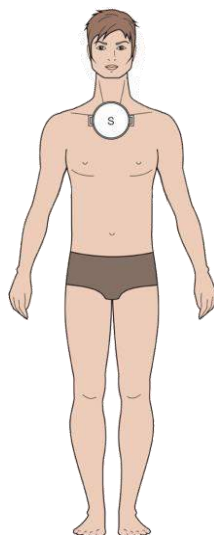

Остеохондропатии (болезнь Келера, болезнь Кинбека, болезнь Пертеса, болезнь Шлаттера, болезнь Кенига).

На курс 10 сеансов.


В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на пораженную область (накрывают или оборачивают в зависимости от области поражения).

- **Программа №34;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее справа - налево
- Индукция: 15 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

Примеры размещения
излучателя

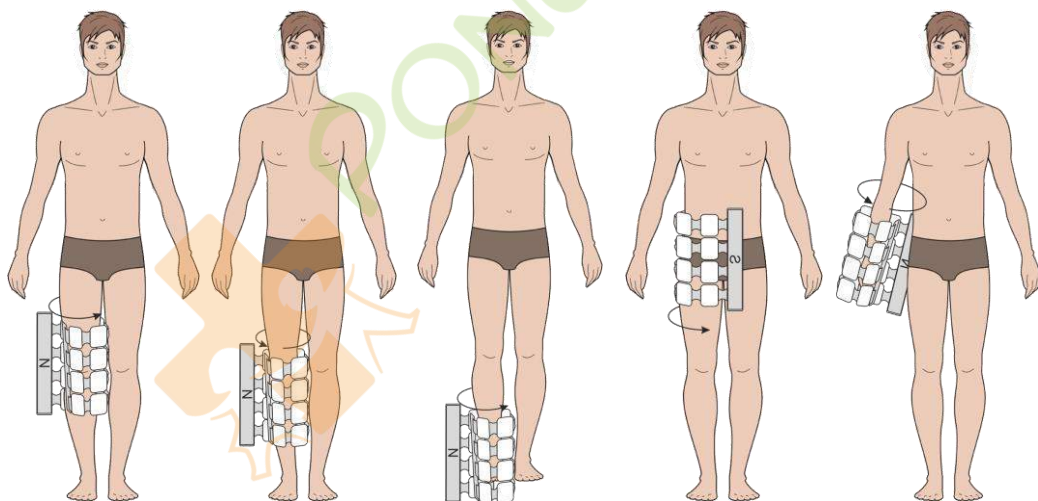

Болезнь
Кенига

Болезнь
Шлаттера

Болезнь
Келлера

Болезнь
Пертеса

Болезнь
Кинбека

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

В этих случаях магнитотерапия эффективна в ранних (I-II) стадиях болезни. При высокой активности процесса (СОЭ, ревматические пробы) магнитотерапия не проводится.

На курс 20 сеансов.

В сеансе 2 процедуры.

Излучатели: ОИ

1-ая процедура



Излучатели размещают: ОИ на шейно-грудной отдел позвоночника.

- **Программа №11;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

2-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

- **Программа №11;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

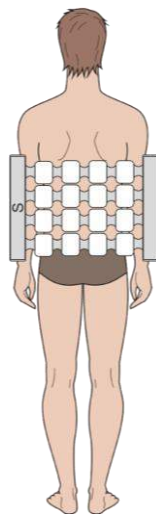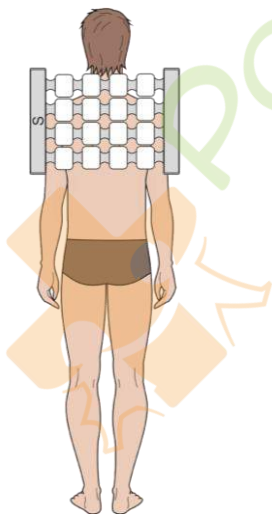

Артрозоартрит височно-нижнечелюстного сустава.

На курс 15 - 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на пораженный сустав.

- **Программа №75;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.



Пример размещения излучателя

Пяточный периостоз (подошвенный фасциит), пяточная шпора.


На курс 15 - 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на пораженную пятку или 2 ЛИ по бокам пораженной пяточной кости.

- **Программа №76;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 30 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

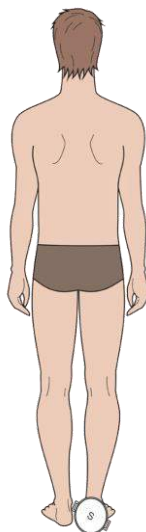

Пример размещения излучателя

Контрактура сустава (контрактура Дюпюитрена)


На курс 15 - 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: 2 ЛИ

Излучатели размещают: 2 ЛИ по бокам пораженной кисти.

- **Программа №65;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 35 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

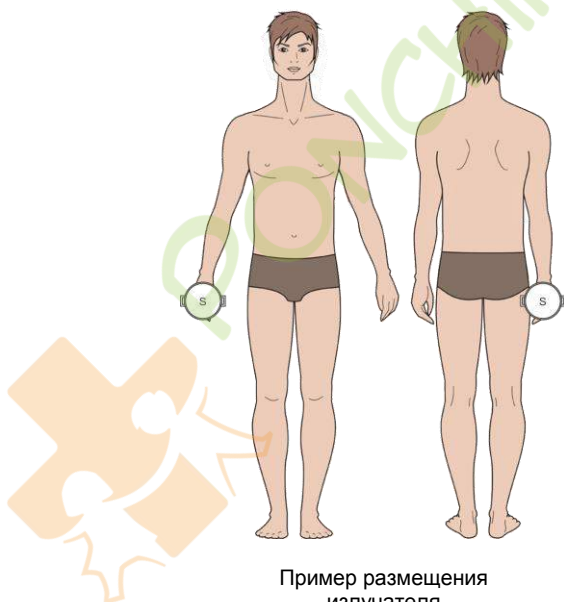

Пример размещения
излучателя

Ревматоидный артрит (экссудативная стадия)

На курс 15 - 20 сеансов.

В сеансе 2 процедуры или три – в зависимости от количества пораженных суставов.

Излучатели: ОИ, ЛИГ


Излучатели размещают: ОИ на область проекции надпочечников, ЛИГ-ом оборачивают пораженный сустав.

1-ая процедура


- Программа №36;
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее в правовращении,
ЛИГ – неподвижное;
- Индукция: ОИ -10 мТл, ЛИГ - 6 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИГ - 16 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

2-ая процедура и 3-я процедуры (если кол-во пораженных суставов больше 2)

- Программа №36;
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее в правовращении,
ЛИГ – неподвижное;
- Индукция: ОИ -10 мТл, ЛИГ - 6 мТл;
- Частота: ОИ – 100 Гц, ЛИГ - 16 Гц;
- Время воздействия: 10мин.

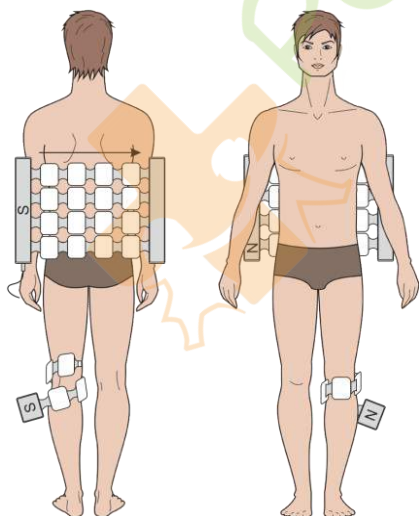

Левая сторона

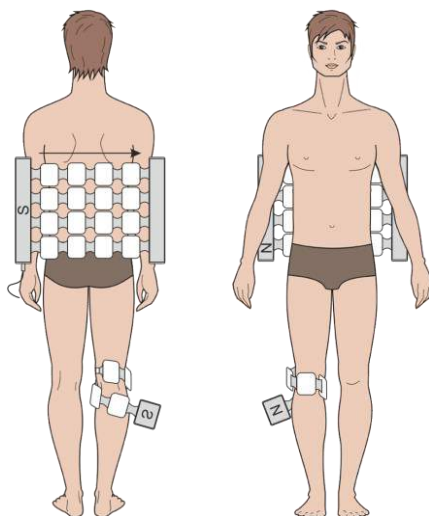

Правая сторона

Пример размещения
излучателей

Остеоартроз

На курс 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают пораженный сустав.


При выраженном синдроме и синовите

- Программа №37;
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее в правовращении;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

Без синовита

- Программа №38;
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее в правовращении;
- Индукция: 25 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

Пример размещения
излучателя

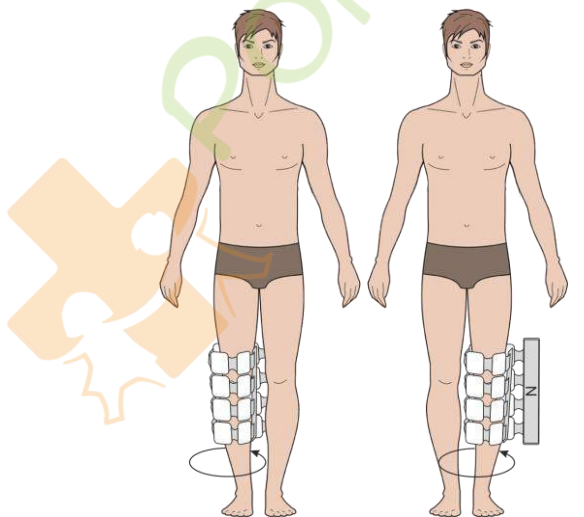

Правая сторона

Левая сторона

Остеохондроз позвоночника

На курс 12 -15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ


Излучатели размещают: ОИ на пораженный отдел позвоночника.

Первые 3 сеанса

- **Программа №39;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 3 Гц;
- Время воздействия: 20мин.

С 4-го сеанса до конца курса

- **Программа №40;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз;
- Индукция: 15 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 20мин.

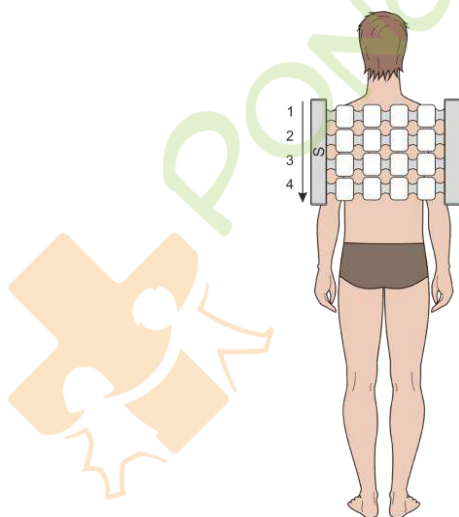

Пример размещения
излучателя

Задний шейный симпатический синдром

Боли жгучего, рвущего, сдавливающего характера в затылке, основании шеи, передней грудной стенке, плече и межлопаточной области или в зонах, совпадающих с топографией симпатического ствола. Боли усиливаются ночью, особенно к утру, могут возникать на фоне чувствительных расстройств по типу «полукуртки с коротким рукавом». Чаще всего синдром развивается на фоне шейного остеохондроза.

На курс 15 сеансов.

В сеансе 2 процедуры.

Излучатели: ОИ

1-ая процедура



Излучатели размещают: ОИ на шейно-грудной отдел позвоночника.

- **Программа №41;**
- Тип магнитного поля: ОИ – бегущее сверху - вниз;
- Индукция: 2 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 10мин.

2-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ оборачивают больную конечность.

- **Программа №42;**
- Тип магнитного поля: ОИ – бегущее в правовращении;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 10мин.

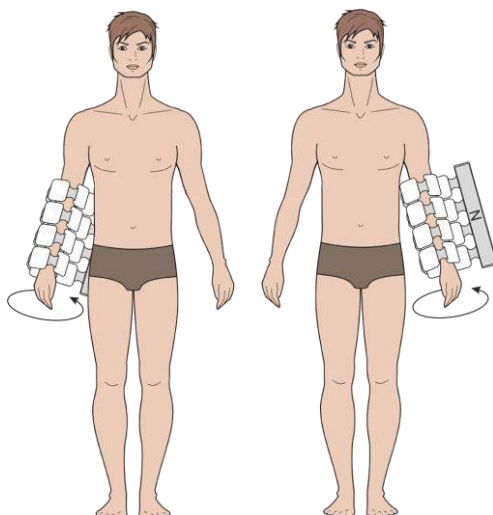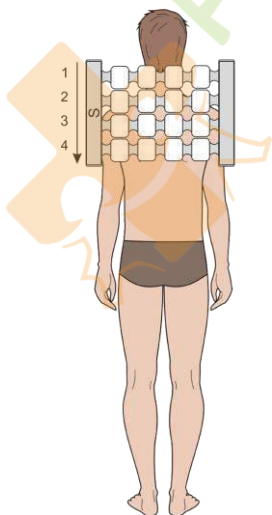

Правая сторона

Левая сторона

Пример размещения излучателя

Вертебро-базиллярный синдром (Синдром позвоночной артерии рефлекторно-компрессионный)

Часто встречающееся сочетание церебральных и вегетативно-ирритативных симптомов, возникающих при раздражении симпатического сплетения позвоночной артерии, деформации ее стенки или изменения просвета (грыжа диска, деформирующий спондилоартрит, напряжение мышц шеи при мышечно-тонических синдромах и т.д.)

На курс 15 сеансов. Повторный курс через 1,5 – 2 месяца.

В сеансе 2 процедуры.

Излучатели: ОИ, ЛИГ

Первые пять сеансов

1-ая процедура



Излучатели размещают: ОИ на шейно-грудной отдел позвоночника.

- **Программа №43;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз;
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

2-ая процедура

Излучатели размещают: ЛИГ оборачивают голову.

- **Программа №44;**
- Тип магнитного поля:
ЛИГ – бегущее в правовращении;
- Индукция: 10 мТл,
- Частота: 12 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

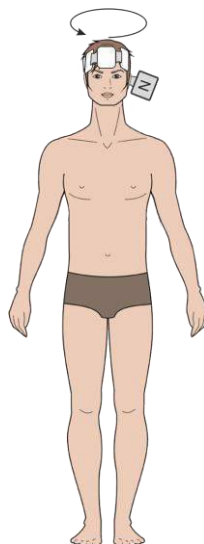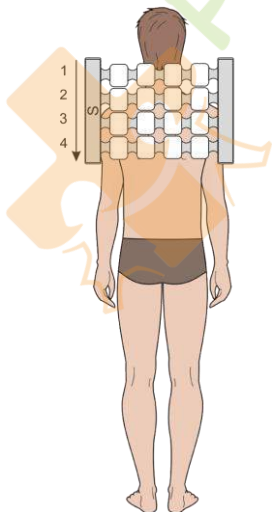

С шестого сеанса до конца курса

1-ая процедура



Излучатели размещают: ОИ на шейно-грудной отдел позвоночника.

- **Программа №45;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз;
- Индукция: 25 мТл;
- Частота: 10 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

2-ая процедура

Излучатели размещают: ЛИГ оборачивают голову.

- **Программа №46;**
- Тип магнитного поля:
ЛИГ – бегущее в правовращении;
- Индукция: 15 мТл;
- Частота: 12 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

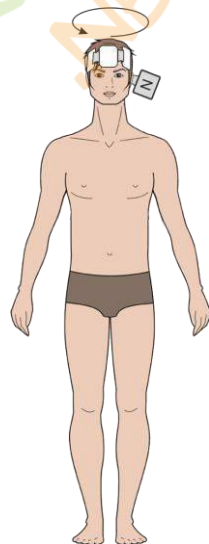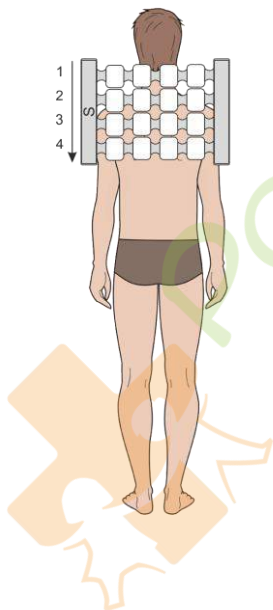

Синдром вертеброгенной миелопатии

Развивающийся на фоне поясничного остеохондроза, слабость и онемение в нижних конечностях (-сти), атрофия (чаще односторонняя) мышц голени, стеспанж («шлепающая стопа»), трофические расстройства, периодическое недержание мочи, временами перемежающаяся хромота.

На курс 15 сеансов.

Повторный курс через 1,5 – 2 месяца.


В сеансе 1 процедуры.

Излучатели: ОИ, ЛИГ

Излучатели размещают: ОИ на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, ЛИГ на бедре и голени.

Программа №47;

- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу – вверх;
ЛИГ – бегущее снизу – вверх;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 15мин.

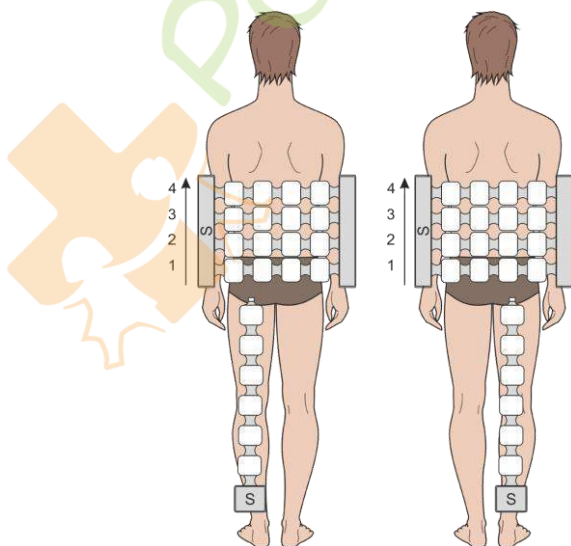

Левая сторона Правая сторона

При парезе

На курс 15 сеансов. Повторный курс через 1,5 – 2 месяца

В сеансе 3 процедуры.

Излучатели: ОИ

1-ая процедура.

Излучатели размещают: ОИ на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

Программа №10;

Тип магнитного поля:

ОИ – неподвижное;

Индукция: 6 мТл;

Частота: 16 Гц;

Время воздействия:

15 мин.

2-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ оборачивают бедро поврежденной конечности.

Программа №10;

Тип магнитного поля:

ОИ – неподвижное;

Индукция: 6 мТл;

Частота: 16 Гц;

Время воздействия:

15 мин.

3-ая процедура

Излучатели размещают: ОИ оборачивают голень поврежденной конечности.

Программа №10;

Тип магнитного поля:




ОИ – неподвижное;

Индукция: 6 мТл;

Частота: 16 Гц;

Время воздействия:

15 мин.

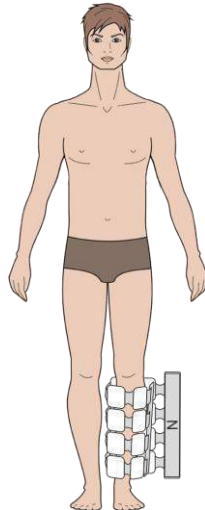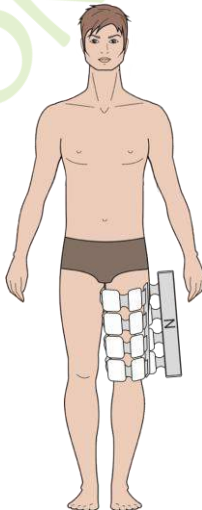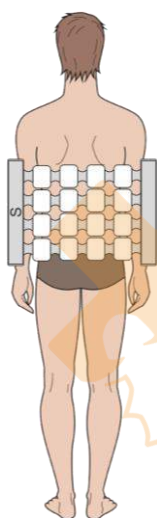

Пример размещения
излучателя

Остеопороз с патологическим переломом и без патологического перелома


На курс 15 сеансов. Повторный курс через 1,5 – 2 месяца

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают поврежденную конечность.

- **Программа №48;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз
- Индукция: 10 мТл;
- Частота: 8Гц;
- Время воздействия: 20мин.

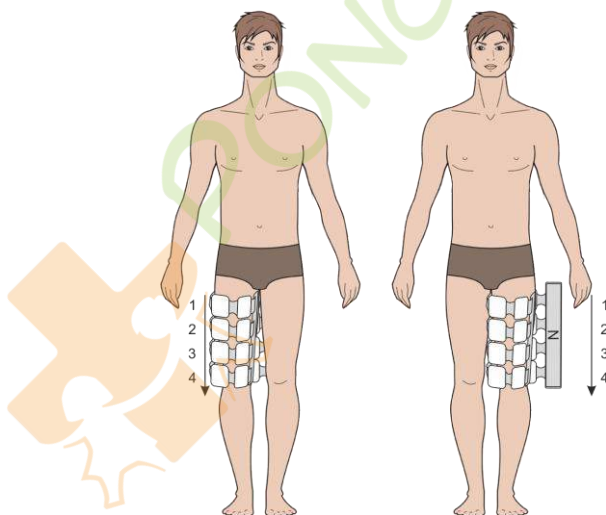

Пример размещения
излучателя

Болезни мочеполовой системы**Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами)**


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на область почек

- **Программа №49;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху - вниз;
- Индукция: 25мТл;
- Частота: 75 Гц;
- Время воздействия: 15 мин

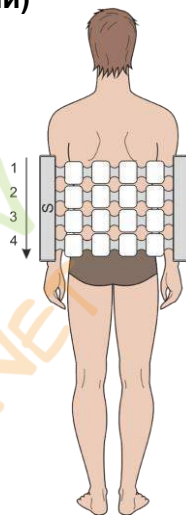**В фазе ремиссии**


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на область почек.

- **Программа №15;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

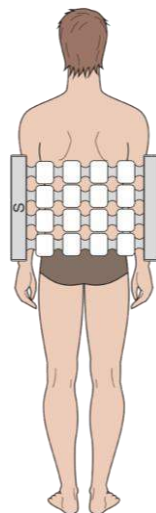

Камни почки и мочеточника


На курс 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на область почек.

- **Программа №49;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз;
- Индукция: 25 мТл;
- Частота: 75 Гц;
- Время воздействия: 15 мин.

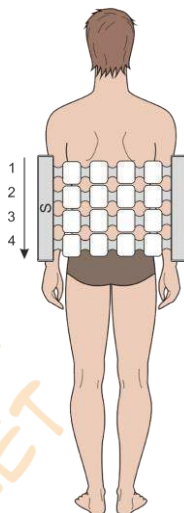

Цистит


На курс 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на область почек, на область проекции мочевого пузыря.

- **Программа №77;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее сверху – вниз,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 15 мТл, ЛИ – 25 мТл;
- Частота: ОИ - 100 Гц. ЛИ – 50;
- Время воздействия: 20 мин.

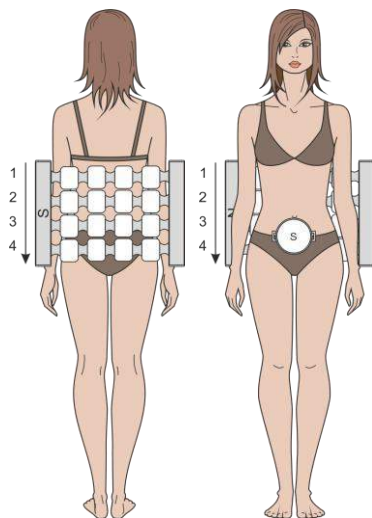

Сальпингит и оофорит


На курс 10 - 12 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ, ЛИ

Излучатели размещают: ОИ на область почек, на пояснично-крестцовую область, ЛИ на область проекции яичника.

- **Программа №78;**
- Тип магнитного поля :
ОИ – бегущее сверху - вниз,
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: ОИ - 25 мТл, ЛИ – 20 мТл;
- Частота: ОИ - 100 Гц, ЛИ – 50;
- Время воздействия: 20 мин.

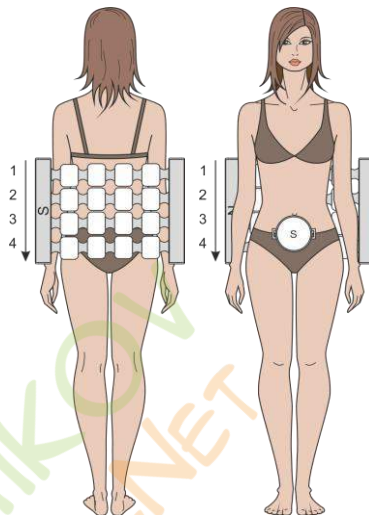

Травмы

Раны (после хирургической обработки).


На курс 15 – 20 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на рану (поверх повязки)

- **Программа №68;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 50;
- Время воздействия: 20 мин.

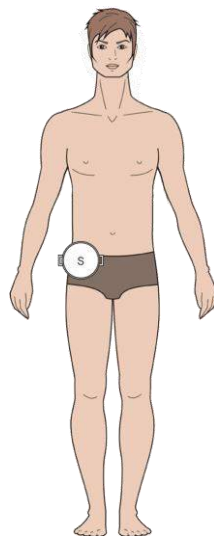

Пример размещения излучателя

Бурситы, в том числе после хирургического лечения (на 3й день после операции).


На курс 10 – 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают поврежденный сустав.

- **Программа №18;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 10 мин.

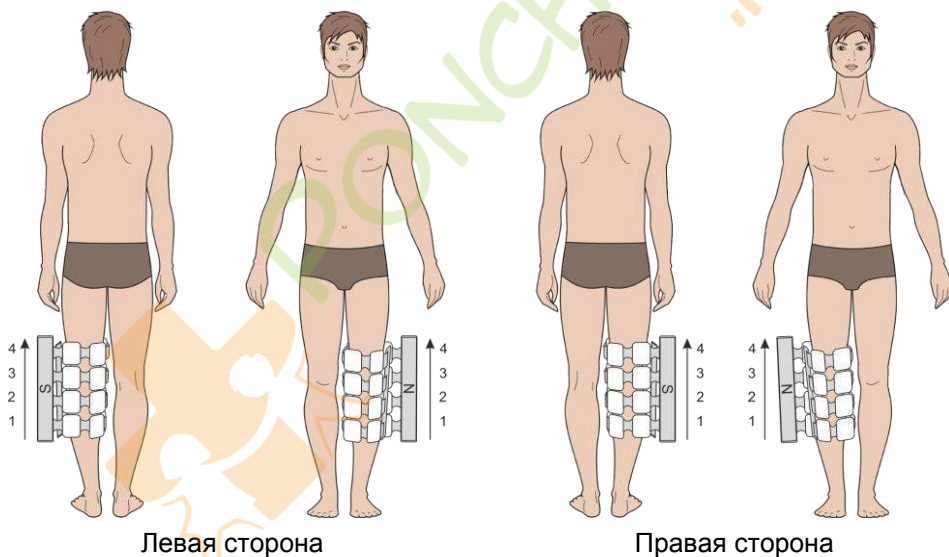

Пример размещения
излучателя

Описание методик лечения травмы (ушиб, вывих сустава)


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают поврежденный сустав.

- **Программа №50;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

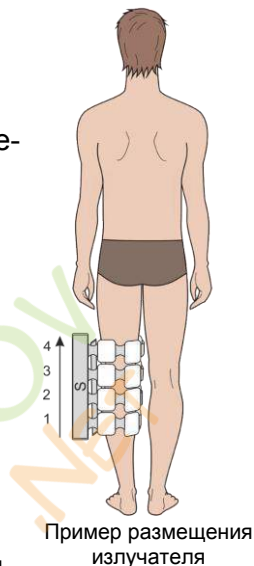

Травмы локтя и предплечья

Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата локтевого сустава.

Вывих головки лучевой кости

Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки

Растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата локтевого сустава

Импульсную магнитную терапию начинают с 3-5 дня после возникновения травмы.


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают поврежденный сустав.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

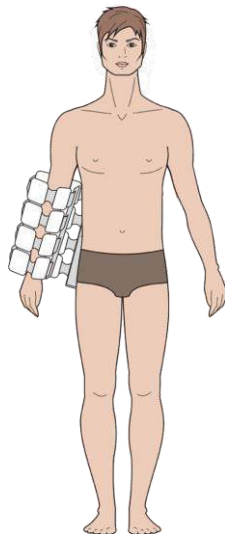

Пример размещения излучателя

Травмы области копчика, тазобедренного сустава и бедра**Кокцигодиния травматическая.**

На курс 10 – 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на область копчика

- **Программа №65;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 35 мТл;
- Частота: 50 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

**Ушиб тазобедренного сустава.**


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ на травмированный тазобедренный сустав

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

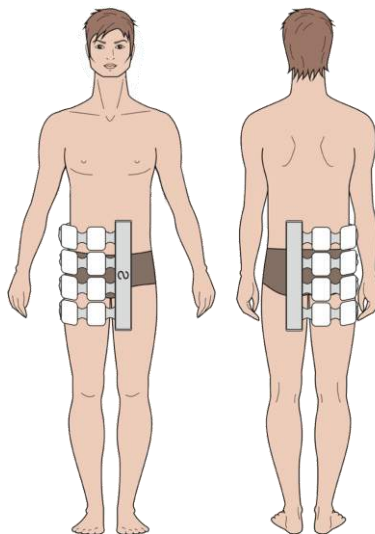

Пример размещения
излучателя

Ушиб бедра.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированное бедро

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

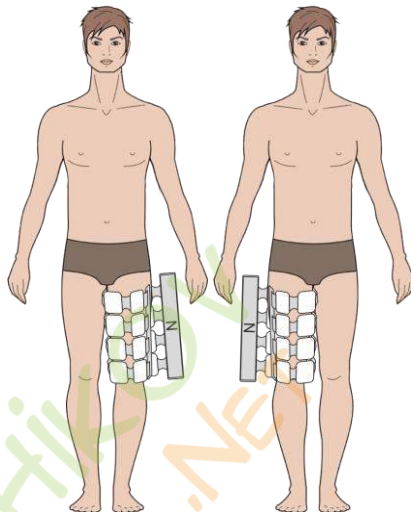

Травмы колена и голени

Ушиб другой уточненной и неуточненной части голени.
Множественные поверхностные травмы голени.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированную голень.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

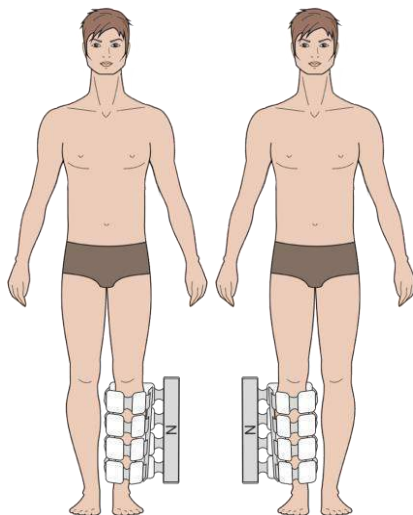

Вывих коленного сустава.

Импульсную магнитную терапию начинают с 3-5 дня после возникновения травмы.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированный коленный сустав.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

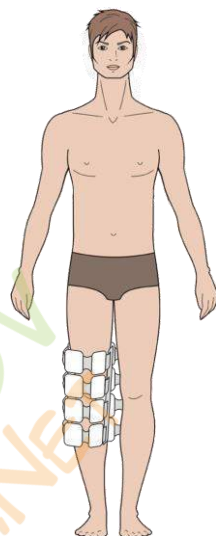

Пример размещения излучателя

Травмы области голеностопного сустава и стопы

Растяжение связок голеностопного сустава (через 72 часа после травмы).


На курс 10 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают поврежденный сустав.

- **Программа №50;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – бегущее снизу - вверх;
- Индукция: 20 мТл;
- Частота: 100 Гц;
- Время воздействия: 20 мин.

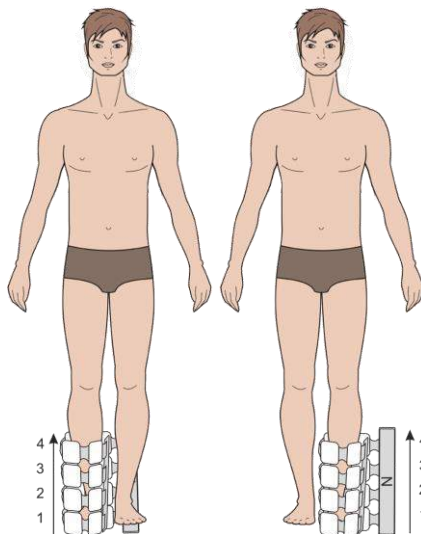

Ушиб голеностопного сустава.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированный голеностопный сустав

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

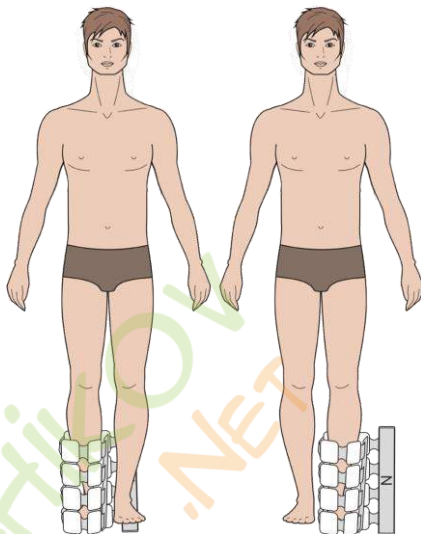

Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки.

Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированную стопу.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

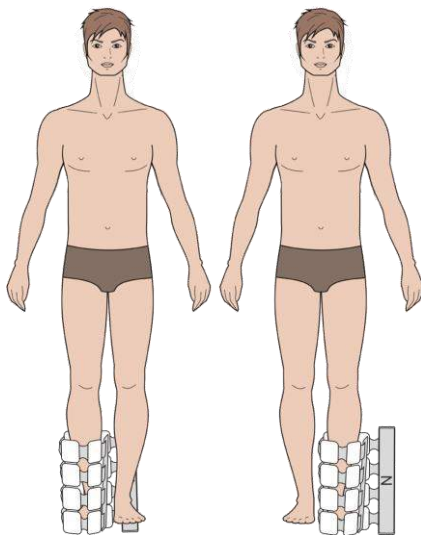

Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы.

Вывих голеностопного сустава.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ обора-
чивают травмированный голено-
стопный сустав и травмированную
стопу.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

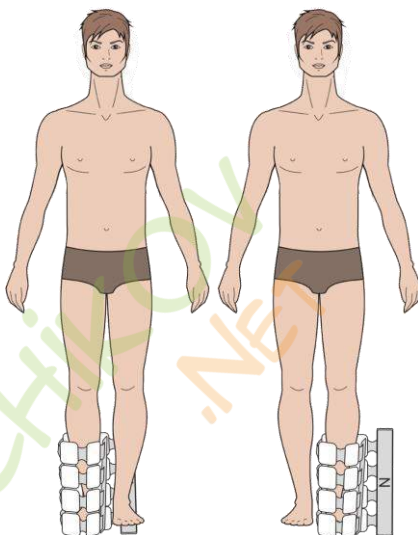

Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы.

Магнитотерапию проводят после
иммобилизации через гипсовую повяз-
ку.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ обора-
чивают травмированные голень, голе-
ностопный сустав, и стопу.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

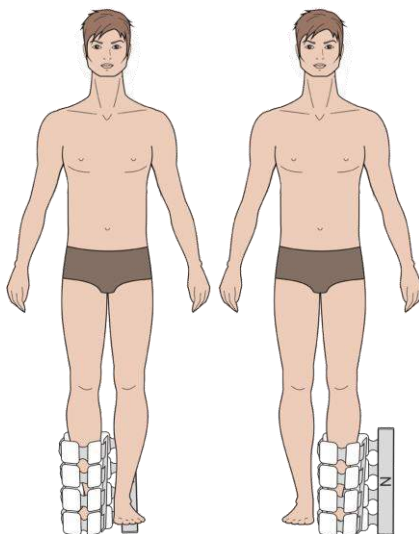

Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ облучают травмированную стопу.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля
ОИ – неподвижное
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

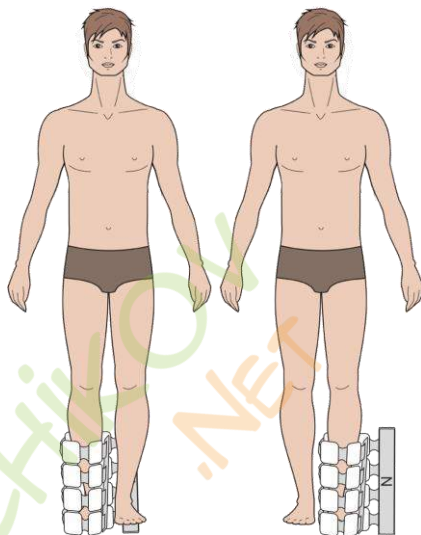

Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы Травма наружного [латерального] подошвенного нерва. Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ облучают голеностопный сустав, стопу травмированной конечности

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

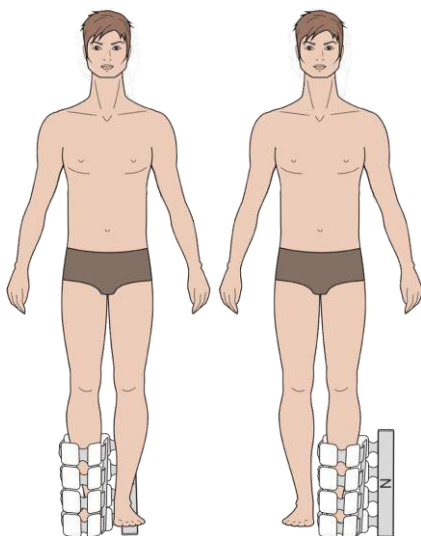

Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы.

Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы.

Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ облучают голень, голеностопный сустав, стопу травмированной конечности.

- Программа №23;
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл,
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

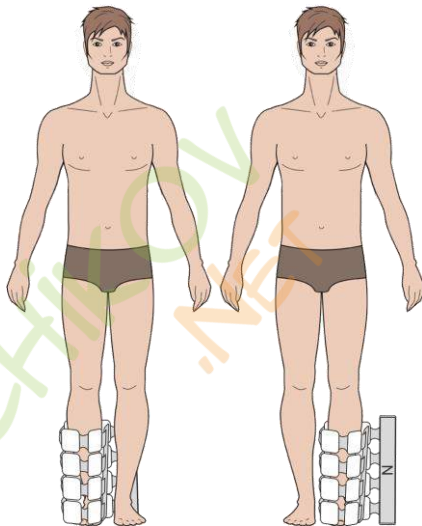

Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы.

Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ облучают голень, голеностопный сустав, стопу травмированной конечности.

- Программа №23;
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

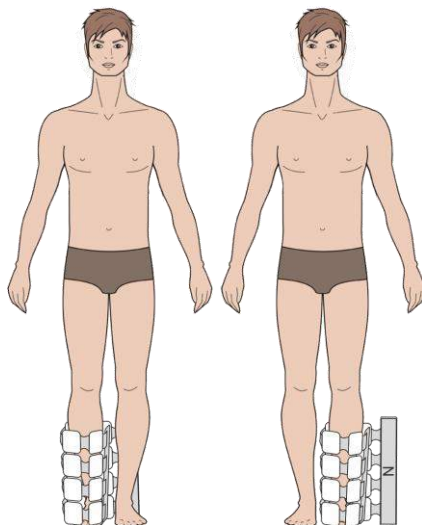

Травма нервов на уровне предплечья. Травма локтевого нерва на уровне предплечья.

Импульсную магнитную терапию начинают с 2-3 дня после травмы.

На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают локтевой сустав и предплечье травмированной конечности.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля:
ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.



Пример размещения излучателя

Травмы запястья и кисти

Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки.

Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки.


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ над областью травматического повреждения или областью отека травмированной конечности (травмированную кисть помещают между двумя индукторами ЛИ).

- **Программа №79;**
- Тип магнитного поля:
ЛИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

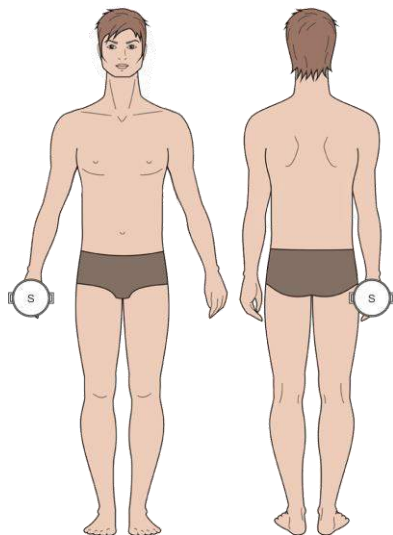

Пример размещения излучателя

Травмы, захватывающие несколько областей тела

Поверхностные травмы нескольких областей верхней(их) конечности(ей).

Поверхностные травмы нескольких областей нижней(их) конечности(ей).


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ОИ

Излучатели размещают: ОИ оборачивают травмированную конечность.

- **Программа №23;**
- Тип магнитного поля: ОИ – неподвижное;
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

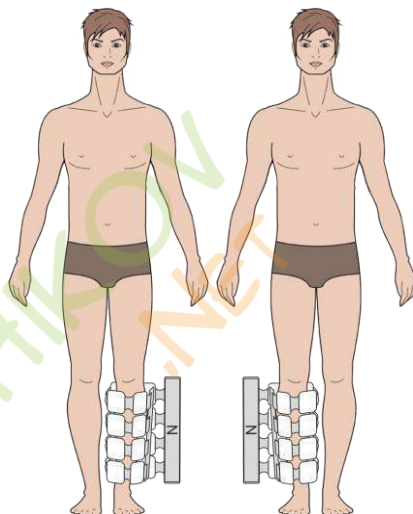

Пример размещения излучателя

Гематома посттравматическая (на 2-3 день после травмы)


На курс 10 - 15 сеансов.

В сеансе 1 процедура.

Излучатели: ЛИ

Излучатели размещают: ЛИ на гематоме травмированной конечности.

- **Программа №79;**
- Тип магнитного поля: ЛИ – неподвижное
- Индукция: 6 мТл;
- Частота: 16 Гц;
- Время воздействия: 30 мин.

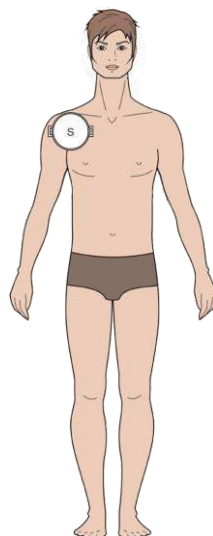

Пример размещения излучателя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02» ГИКС.941519.104 ТУ заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.941519.104 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Номер версии программного обеспечения _____

☐

Вариант поставки №1

☐

Вариант поставки №2

Дата выпуска _____

М.П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02» ГИКС.941519.104 ТУ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

М.П.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата требованиям раздела «Технические характеристики» руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его составные части по предъявлении гарантийного талона.

Условия гарантии.

Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и четкой печатью торгующей организации.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы аппарата;
- если аппарат имеет механические повреждения;
- если аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети требованиям Государственных стандартов.

Электрические схемы, описание и другую техническую документацию изготовитель высылает по запросу уполномоченных сервисных центров.

Для ремонта неисправный аппарат вместе с руководством по эксплуатации и пояснительной запиской отправляются по адресу:

*391351, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ».*

Дополнительную информацию по ремонту можно получить по телефонам:

Елатьма (49131) 4-49-03

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии – 8 800 200 01 13

Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл.,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ»,
тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02»
ГИКС.941519.104 ТУ изготовлен и принят в соответствии с
техническими условиями ГИКС.941519.104 ТУ

☐

Вариант поставки №1

☐

Вариант поставки №2

Дата изготовления _____ № _____

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-
приятием _____ Дата _____

Города _____

Выдан после ремонта _____
(дата, подпись)

М.П.

Подпись руководителя ремонтного
предприятия _____

Подпись руководителя учреждения-владельца

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и слу-
жит основанием для предъявления счета на оплату за
произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Корешок гарантийного талона
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02
Изыят " _____ " 20 ____ г.
Мастер цеха (ателье) _____
фамилия, подпись

Аппарат общей и локальной магнитотерапии ПОЛИМАГ-02

Елатомский приборный завод представляет новое изделие для лечебно-профилактических учреждений — аппарат магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02».

ПОЛИМАГ-02 - это логическое развитие аппарата ПОЛИМАГ-01. Сохранив все достоинства своего предшественника, ПОЛИМАГ-02 обладает целым рядом преимуществ перед ним.

В аппарате ПОЛИМАГ-02 изменился состав излучателей. Помимо четырёх основных и одной гибкой излучающей линейки, в Полимаг-02 введена вторая гибкая излучающая линейка и дополнительные излучатели:

- Локальные излучатели для воздействия магнитным полем на глубоко расположенные органы для лечения органов брюшной полости и грудной клетки.

- Излучатель Оголовье предназначен для лечения заболеваний головного мозга, гипертонической болезни.

- Офтальмологический излучатель предназначен для лечения офтальмологических, ЛОР заболеваний, а также заболеваний, где нужна маленькая площадь воздействия, например при лечении детей.

В Полимаге-02 предусмотрена возможность подключения к персональному компьютеру с помощью беспроводной технологии Bluetooth для организации автоматизированного рабочего места. Это обеспечивает: дистанционное управление аппаратом; доступ к обширной базе данных нозологических форм и методик лечения; создание баз данных пациентов.

В Полимаге-02 появилась возможность проводить лечение сразу двух пациентов с разными нозологиями, задавая индивидуально для каждого необходимые параметры воздействия. В случае затруднения всегда можно обратиться к краткой справочной информации об органах управления и индикации аппарата, нажав кнопку «i» на табло.

Для удобства работы в память аппарата заложено 99 программ для лечения наиболее распространённых заболеваний. Все они были разработаны в ходе эксплуатации Полимага-02 в ГКБ имени Бурденко и других медицинских учреждениях.

В аппарате Полимаг-02 имеется возможность вводить параметры воздействия вручную. Это позволяет использовать аппарат для разработки авторских методик лечения.

ПОЛИМАГ-02 предназначен для лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой, эндокринной систем; внутренних органов; нагноительных заболеваний; с иммунодефицитными состояниями; травматическими повреждениями и их осложнениями.

Еще одна немаловажная особенность нового ПОЛИМАГа-02 заключается в том, что теперь аппарат может с успехом применяться в педиатрии.

ПОЛИМАГ-02 — действительно эффективный аппарат нового поколения, который удачно сочетает в себе все плюсы новейших стационарных установок — это воздействие на большие площади тела больного, широкий выбор лечебных параметров, программирование, доступная даже малобюджетным учреждениям стоимость.

Уникальные возможности аппарата Полимаг-02 открывают большие горизонты не только для практической медицины, но для творческой и научно-исследовательской медицинской деятельности.

**Елатомский приборный завод –
Все для здоровья. Здоровье для Вас.**

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29

8-800-200-01-13, звонок бесплатный

admin@elamed.com

www.elamed.com



Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл.,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ»,
тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02»
ГИКС.941519.104 ТУ изготовлен и принят в соответствии с
техническими условиями ГИКС.941519.104 ТУ

☐

Вариант поставки №1

☐

Вариант поставки №2

Дата изготовления _____ № _____

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-
приятием _____ Дата _____

Города _____

Выдан после ремонта _____
(дата, подпись)

М.П.

Подпись руководителя ремонтного
предприятия _____

Подпись руководителя учреждения-владельца

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и слу-
жит основанием для предъявления счета на оплату за
произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Корешок гарантийного талона
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02
Изыят " _____ г.
Мастер цеха (ателье) _____
фамилия, подпись

Термотерапия устройством ТЕПЛОН® (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)

Устройство локальной четырёхместной термотерапии малогабаритное с шестью нагревательными элементами ТЕПЛОН® предназначено для эффективного лечения заболеваний дыхательных путей, органов брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, травм, ЛОР-заболеваний, а также для восстановления функций органов и систем.



Устройство состоит из источника питания и шести нагревательных элементов, выполненных из медицинского пластика: четыре нагревательных элемента в форме горчичника; один нагревательный элемент, адаптированный к поверхностям пазух (гайморовых, фронтальных) и горла; один нагревательный элемент для лечения болезней уха.

ТЕПЛОН позволяет:

- проводить на больной орган неограниченное во времени локальное воздействие в строго дозированном тепловом режиме;
- обеспечить глубокое локальное прогревание внутренних органов;
- уменьшить количество принимаемых лекарственных веществ;
- с комфортом, без раздражения кожи, провести процедуры.

Устройство прошло испытания в МГМСУ им. Н.А.Семашко, РМАПО г. Москва, I-ой городской клинической больницы г. Москва. Устройство рекомендовано для лечения в домашних условиях и в лечебно-профилактических учреждениях. Производство сертифицировано на соответствие международному стандарту EN ISO 13485. Имеются противопоказания, поэтому перед применением следует проконсультироваться у специалиста.

На 50-ом Всемирном Салоне инноваций Брюссель Эврика-2001 устройство удостоено серебряной медали выставки, является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

**Елатомский приборный завод -
Все для здоровья. Здоровье для Вас.**

Спрашивайте изделие в аптеках, магазинах «Медтехника» или заказывайте прямо на заводе. На все интересующие Вас вопросы ответят врачи-консультанты.

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29

8-800-200-01-13, звонок бесплатный

admin@elamed.com

www.elamed.com

Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл.,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ»,
тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02»
ГИКС.941519.104 ТУ изготовлен и принят в соответствии с
техническими условиями ГИКС.941519.104 ТУ

☐

Вариант поставки №1

☐

Вариант поставки №2

Дата изготовления _____ № _____

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-
приятием _____ Дата _____

Города _____

Выдан после ремонта _____
(дата, подпись)

М.П.

Подпись руководителя ремонтного
предприятия _____

Подпись руководителя учреждения-владельца

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и слу-
жит основанием для предъявления счета на оплату за
произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Корешок гарантийного талона
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02
Изыят " _____ " 20 ____ г.
Мастер цеха (ателье) _____
фамилия, подпись

